



Medimar S.r.l.  
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale  
Sede Legale: Via Ebro, 8 - 20141 Milano  
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566  
E-mail: info@medimaritalia.it  
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

## **SCHEDA TECNICA** **iCO™ Smokerlyzer®**



*CND Z1203020402*  
*RDM 1476625*

### **Il primo monitor Smokerlyzer al mondo per la rivelazione di CO nel respiro per smartphone/tablet**

iCO™ è un monitor per rivelare il livello di concentrazione di CO dal respiro, con la possibilità di collegamento diretto ad uno smartphone/tablet e di poter eseguire il test ovunque ed in qualsiasi momento si desidera.

Basta soffiare nell'iCO™ Smokerlyzer per ottenere il livello di CO nel flusso sanguigno prevalentemente causato dal fumo.

Le letture vengono immediatamente scaricate sul profilo personale dell'App Smokerlyzer, in modo da visualizzare l'andamento del tentativo di smettere di fumare. Lo Smokerlyzer può essere collegato allo smartphone/tablet mediante il connettore delle cuffie ed interfacciarsi semplicemente con l'App qualora richiesto.


#### **Smokerlyzer App**

L'App Smokerlyzer consente di visualizzare istantaneamente i valori personali di CO, di elaborare la dipendenza dalla nicotina e di tracciare i progressi ottenuti nel tempo. E' possibile anche trasmettere via email i risultati direttamente ad un operatore sanitario.



Medimar S.r.l.  
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale  
Sede Legale: Via Ebro, 8 -20141 Milano  
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566  
E-mail: info@medimaritalia.it  
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

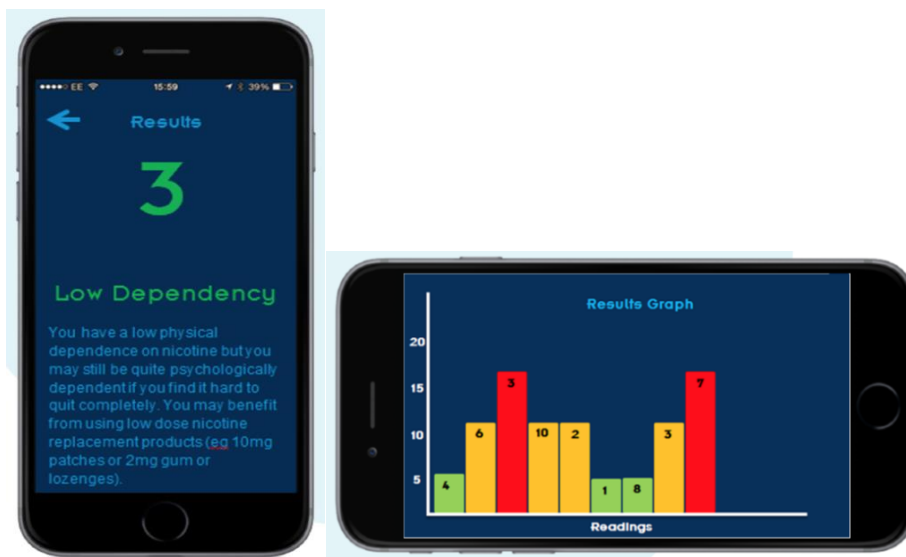

## Specifiche Tecniche

Garanzia	24 mesi
Concentrazione	0 – 100 ppm
Principio di rivelamento	Sensore elettrochimico
Ripetibilità	± 5%
Interferenza H <sub>2</sub>	< 6%
Vita Operativa	200 test / 3 anni
Sensibilità del sensore	1 ppm
Dimensioni	28mm x 115mm
Peso	35g